


# Oropharyngeal (Throat) Swab Specimen Collection Guide


## Clinician-collection with the cobas® PCR Media Uni or Dual Swab Sample Kit

### PROCEDURAL NOTES:

- If using the **cobas®** PCR Media Dual Swab Sample Kit, discard the flocked swab, as it is not needed for this procedure. **Use only the woven swab.**
- Minimize use of over-the-counter hygiene and/or prescription products in the throat during or prior to sample collection to avoid potential for test interference.
- Avoid contact of the **cobas®** PCR Media with the skin, eyes or mucous membranes. If contact does occur, immediately wash with large amounts of water.

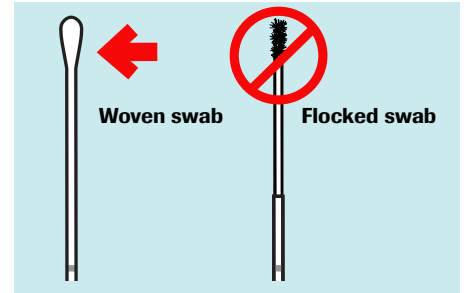


**NOTE: Do not** pre-wet the swab in **cobas®** PCR Media before collection.

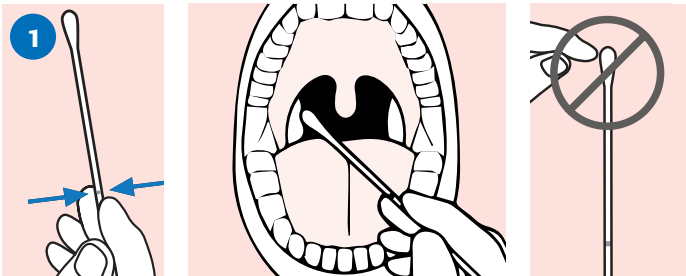


### COLLECT:

- To collect the specimen, hold the woven swab with the scoreline above your hand.
- Insert the swab into the mouth and collect the specimen from the bilateral posterior pharynx, both tonsils and the uvula.
- Withdraw the swab carefully.
- Do not let the swab touch any surface before placing it into the collection tube.

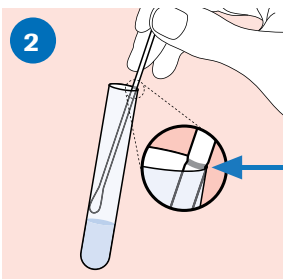


### ALIGN:

- Remove the cap from the **cobas®** PCR Media Tube.
- Lower the swab specimen into the tube until the visible scoreline on the swab is aligned with the tube rim.
- The tip of the swab should not be submerged into the liquid prior to breaking the shaft.

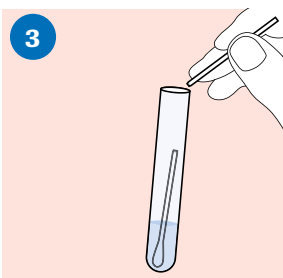

### BREAK:

- Carefully leverage the swab against the tube rim to break the swab shaft at the scoreline.

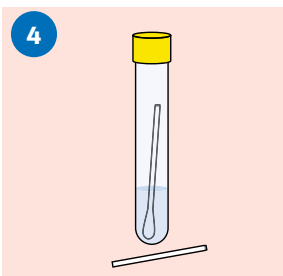

### CLOSE:

- Tightly re-cap the **cobas®** PCR Media Tube. The specimen is now ready for transport.
- Discard the top portion of the swab.

### SPECIMEN TRANSPORT AND STORAGE:

- Transport and store the **cobas®** PCR Media Tube containing the collection swab at 2°C to 30°C.
- The specimen should only contain 1 woven swab and may be rejected if the tube contains no swab or 2 swabs.

# Guía de recolección de muestras con hisopo bucofaríngeos (garganta)


## Recolección clínica con el kit de muestra de uno o dos hisopos de medio cobas® para PCR

### NOTAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO:

- Si se utiliza el kit de muestra de dos hisopos de medio **cobas**® para PCR, deseche el hisopo flocado, ya que no es necesario para este procedimiento. **Utilice el hisopo tejido.**
- A fin de evitar una posible interferencia con la prueba, reduzca el uso de productos de higiene de venta libre o productos recetados en la garganta durante o antes de la recolección de la muestra.
- Evite el contacto del medio **cobas**® para PCR con la piel, los ojos o las membranas mucosas. Si se produce el contacto, enjuague de inmediato con abundante agua.




**NOTA:** **No** humedezca previamente el hisopo en el medio **cobas**® para PCR antes de la recolección.

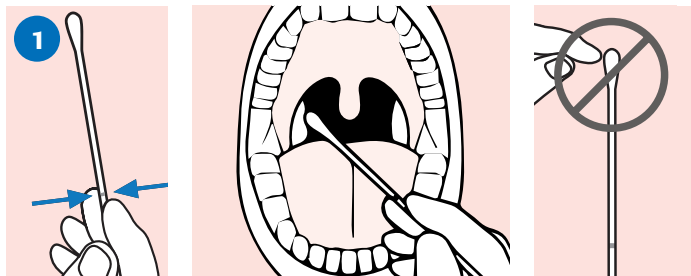


### RECOGER:

- Para recoger la muestra, sostenga el hisopo tejido con la línea ranurada por encima de la mano.
- Inserte el hisopo en la boca y recolecte la muestra desde la faringe posterior bilateral, ambas amígdalas y la úvula.
- Retire el hisopo con cuidado.
- No permita que el hisopo toque ninguna superficie antes de colocarlo en el tubo de recolección.

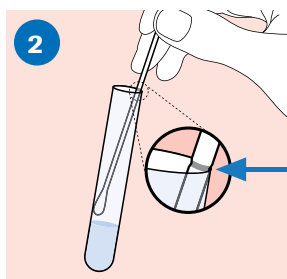


### ALINEAR:

- Quite la tapa del tubo de medio **cobas**® para PCR.
- Baje la muestra con hisopo hacia el tubo hasta que la línea ranurada visible del hisopo quede alineado con el borde del tubo.
- Antes de romper el mango, no se debe sumergir la punta del hisopo en el líquido.

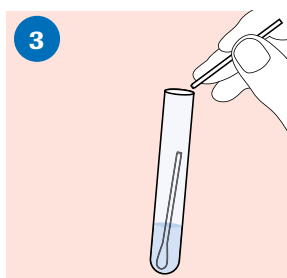

### ROMPER:

- Con cuidado, presione el hisopo contra el borde del tubo para romper el mango del hisopo por la línea ranurada.

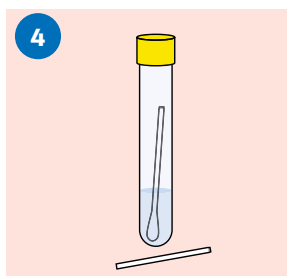

### CERRAR:

- Tape correctamente el tubo de medio **cobas**® para PCR. La muestra está lista para su transporte.
- Deseche la parte superior del hisopo.

### TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LA MUESTRA:

- Transporte y almacene el tubo de medio **cobas**® para PCR que contiene el hisopo de recolección a una temperatura entre 2°C y 30°C.
- La muestra solo debe contener 1 hisopo tejido, y es posible que se la rechaza si el tubo no contiene ningún hisopo o 2 hisopos.